

entro la dentina, applicare un secondo strato di One-Q-Bond C.G.T. Rimuovere subito i solventi e fotopolimerizzare per 20 secondi.

8. Ricostruire la superficie con resine auto o fotopolimerizzabili, o con cementi compositi.
Se la fotopolimerizzazione non è possibile, One-Q-Bond C.G.T. deve essere polimerizzato con l'utilizzo di Activator. Mescolare bene un ugual numero di gocce di One-Q-Bond C.G.T. e Activator per due secondi e procedere come nel punto 5.

ONE-Q-BOND C.G.T.

Universal, no-rinse, self-priming etchant adhesive system

EN INDICATIONS

1. Etch dentin for 5-10 seconds. For enamel, etch for 20-30 seconds.
2. Rinse with a spray of oil-free water for 5-10 seconds.
3. Blot dry excess moisture from the surface. Verify that the surface has no visible moisture.
4. Dispense One-Q-Bond C.G.T. directly onto a microbrush
5. Apply ample amount of One-Q-Bond C.G.T. directly onto a microbrush.
6. Remove solvents with a gentle air flow for at least 15 seconds or until no visible movement of the resin is noted.

If the surface appears incompletely partially coated, apply additional material and dry again.

7. Light-cure One-Q-Bond C.G.T. for 20 seconds. If the restoration retention area lies primarily within dentin, apply a second layer of One-Q-Bond C.G.T., remove solvents immediately and light-cure for 20 seconds.
8. Restore with light-cure or self-cure composite resin of your choice or cement restoration with Composite resin cement. For light-inaccessible procedures, One-Q-Bond C.G.T. can be self-cured by utilizing the One-Q-Bond Activator. Mix equal number of drops of One-Q-Bond C.G.T. and Activator in a clean mixing well for 2 seconds and proceed with step 5.

ONE-Q-BOND C.G.T.

Système universel d'adhésif d'attaque sans rinçage et auto-mordantant

FR INDICATIONS

1. Mordancer la dentine pendant 5-10 secondes. Mordancer l'émail pendant 20-30 secondes.
2. Rincer avec un spray d'eau exempt d'huile pendant 5-10 secondes.
3. Eliminer l'éventuel excès d'humidité de la surface. Vérifier que la surface n'a pas d'humidité visible.
4. Appliquer One-Q-Bond C.G.T. directement sur un micropinceau.

PRECISION

ONE-Q-BOND C.G.T.



B.J.M. Laboratories Ltd.
12 Hassadna St., Industrial Park, Or-Yehuda 6022011 Israel



QUASER S.r.l.
Via Pian due Torri 19, 00146 Rome, Italy

CE
0425

Rev.03_06/21

Selected, distributed and guaranteed by Dentalica
Sélectionné, distribué et garanti par Dentalica
Seleccionado, distribuido y garantizado por Dentalica

Selezionato, distribuito e garantito da



DENTALICA

Dentalica S.p.A., Via Rimini 22, I-20142 Milano, Italia
Tel. +39.02.895981, info@dentalica.com, www.dentalica.com

PRECISION

Protocollo d'uso
Protocol of use

ONE-Q-BOND C.G.T.

Sistema adesivo universale, senza
risciacquo, con primer auto-mordenzante
Universal, no-rinse, self-priming etchant
adhesive system




DENTALICA
Into quality




1

2


3

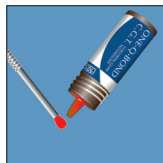


4

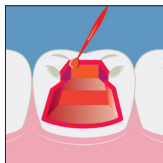

5

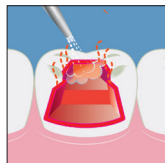

6

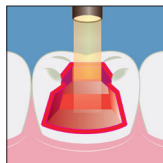

7



8

5. Appliquer une grande quantité de One-Q-Bond C.G.T. et laisser agir pendant 15 secondes.
 6. Eliminer les solvants avec un jet d'air énergique pendant au moins 15 secondes, ou jusqu'à ce qu'il n'y soit plus de déplacement de résine. Si la surface apparaît incomplètement recouverte, ajouter du produit et séchez à nouveau.
 7. Photopolymériser One-Q-Bond C.G.T. pendant 20 secondes. Si le secteur de rétention de la restauration est principalement composé de dentine, appliquer une seconde couche. Eliminer immédiatement les solvants et photopolymériser pendant 20 secondes.
 8. Restaurer la surface avec des résines auto ou photopolymérisable de votre choix, ou des ciments composites.
- Quand la polymérisation n'est possible, One-Q-Bond C.G.T. peut être auto-polymérisé avec One-Q-Bond Activator. Mélanger la même quantité de gouttes de One-Q-Bond C.G.T. et de Activateur dans un puits de mélange propre pendant 2 secondes et passez à l'étape 5.

ONE-Q-BOND C.G.T.

Sistema universal adhesivo decapante de autocebado, sin aclarado

ES INDICACIONES

1. Grabar la dentina durante 5-10 segundos. Grabar el esmalte durante 20-30 segundos.

2. Enjuagar con un spray de agua durante 5-10 segundos.
 3. Eliminar el exceso de humedad desde la superficie. Compruebe que no sea visible humedad en la superficie.
 4. Aplicar One-Q-Bond C.G.T. directamente sobre a un micro cepillo.
 5. Aplicar una abundante cantidad de One-Q-Bond C.G.T. y dejar actuar durante 15 segundos.
 6. Eliminar el solvente sobrante con un enérgico chorro de aire durante 15 segundos, u hasta que no se vean residuos de resina. Si la superficie parece recubierta de manera incompleta, añadir producto y seque nuevamente.
 7. Polimerizar con luz One-Q-Bond C.G.T. durante 20 s. Si la reconstrucción esté completamente en la dentina, aplicar una segunda capa de producto. Eliminar enseguida los solventes y polimerizar durante 20 s.
 8. Restaurar la superficie con de las resinas autopolimerizable o polimerizable, o con empastes compuestos.
- Quando la polimerización no sea posible, One-Q-Bond C.G.T. se puede autopolimerizar utilizando One-Q-Bond Activator. Mezcle la misma cantidad de gotas de One-Q-Bond C.G.T. y Activador en una loseta durante 2 segundos y continúe con el paso 5.

ONE-Q-BOND C.G.T.

Sistema adesivo universale, senza risciacquo, con primer auto-mordenzante

IT INDICAZIONI

1. Mordenzare la dentina per 5-10 secondi. Per lo smalto, mordenzare per 20-30 secondi.
2. Sciacquare con uno spray d'acqua privo d'olio per 5-10 secondi.
3. Eliminare eventuali eccessi di umidità dalla superficie. Verificare che la superficie non abbia umidità visibile.
4. Applicare One-Q-Bond C.G.T. direttamente su un micro-applicatore.
5. Applicare una cospicua quantità di One-Q-Bond C.G.T. e lasciare agire per 15 secondi.
6. Rimuovere i solventi con un vigoroso getto d'aria per almeno 15 secondi o sino a quando non si noti alcun visibile movimento della resina. Se la superficie apparisse rivestita in modo incompleto, applicare ulteriori quantità di materiale e asciugare nuovamente.
7. Fotopolimerizzare One-Q-Bond C.G.T. per 20 secondi. Se l'area di ritenzione della ricostruzione si trova primariamente

PRECISION