


Axia Fluid VS

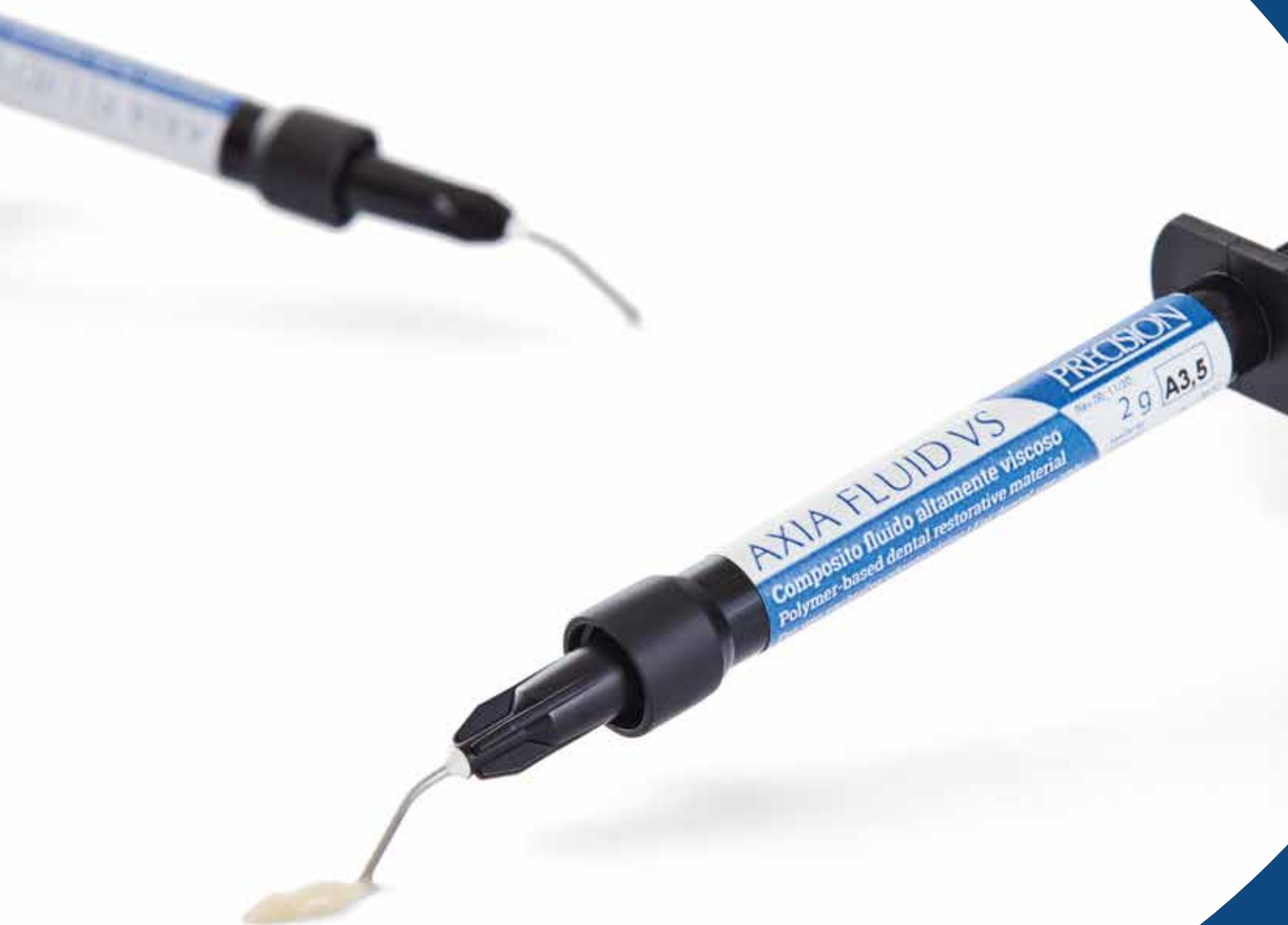

Axia Fluid VS

Composito fluido fotopolimerizzabile ad elevata viscosità.

Axia Fluid VS è un composito fluido microibrido caratterizzato da un'elevata viscosità, che combina la lavorabilità tipica dei compositi fluidi con le proprietà fisiche di un composito per ricostruzione.

È ideale per:

- La sigillatura di solchi e fessure
- Piccole correzioni estetiche di forma e colore dello smalto
- Otturazioni poco invasive di classe I, II e III
- Restauri di V classe

1-1,5mm

Spessore film

12316

Modulo di Young (MPa)

794

Durezza Vickers (MPa)

40 sec.

Tempo di polimerizzazione

144

Resistenza alla flessione (MPa)

431

Resistenza alla compressione (MPa)

77%

Filler



Vantaggi

● Consistenza fluida ottimale

Axia Fluid VS ha una formulazione altamente viscosa che garantisce un'applicazione precisa e rapida anche nelle zone più difficili. Durante l'applicazione non forma bolle e non cola, adattandosi perfettamente alle pareti della cavità.

● Eccellenti proprietà meccaniche

L'alto contenuto di riempitivo (77%) ne aumenta considerevolmente le proprietà meccaniche, la resistenza all'usura e la lucidabilità, garantendo restauri stabili e duraturi nel tempo.

● BIS-GMA Free

La sua composizione a base uretanica e quindi l'assenza di Bis-GMA nella matrice organica rende il materiale altamente biocompatibile.

● Ampia gamma di colori

È disponibile in un'ampia gamma di colorazioni della scala VITA: A1 A2 A3 A3,5 B1 B2 B3.

● Alta radiopacità


Con una radiopacità al 210% è facilmente individuabile tramite rx.




● Axia Fluid VS

● Competitor 1


● Competitor 2

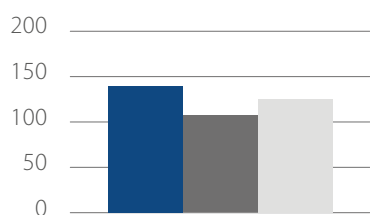

Resistenza alla flessione (MPa)

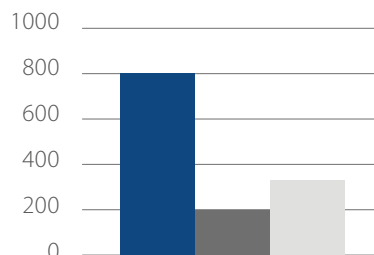


Durezza Vickers (MPa)

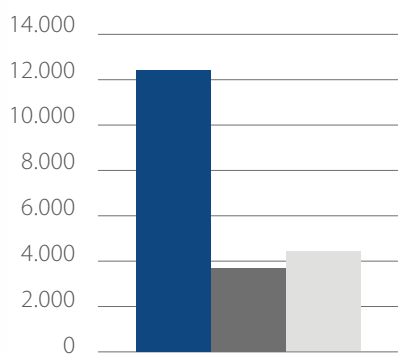

Modulo di Young (MPa)

(dati interni)

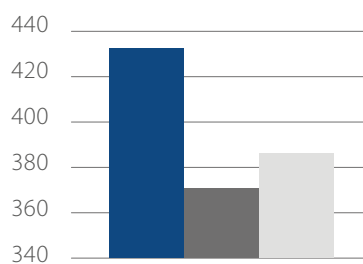

Resistenza alla compressione (MPa)



Caso clinico

Dr. Andrea Fabianelli

Restauro di elemento 15 con lesione cervicale non cariosa con tecnica total Etch e applicazione di composito fluido.



Foto pre-operatoria di una lesione cervicale non cariosa.



Isolamento della lesione con diga di gomma.



Mordenzatura della lesione.



Applicazione adesivo Universale One Q Bond CGT.



Applicazione Axia Fluid VS.



Restauro ultimato.



Ogni confezione contiene: 2 siringhe da 2 g, 10 punte per applicazione

A1	PR00100A1
A2	PR00100A2
A3	PR00100A3
A3,5	PR00100A4

B1	PR00100B1
B2	PR00100B2
B3	PR00100B3

PRECISION

La gamma Precision è nata nel 1994.

È nata con lo spirito di dare certezza. La certezza di avere in mano solo soluzioni affidabili.

Ogni prodotto marchiato Precision è il risultato di una lunga ed attenta ricerca a livello internazionale, presso i migliori produttori. Noi non produciamo, bensì selezioniamo e questo ci permette di ottenere sempre il meglio, rivolgendoci solo ad aziende leader nella produzione di quello specifico materiale.

Per questo motivo i nostri prodotti rappresentano il meglio per l'arte odontoiatrica.

Dal 1994 non abbiamo smesso di offrire certezze ai nostri clienti.

Creato in esclusiva per



PRECISION è un marchio di:
DENTALICA S.p.A. – Via Rimini, 22 – 20142 Milano
info@dentalica.com – www.dentalica.com