


Absolute Shaper 

Absolute Shaper

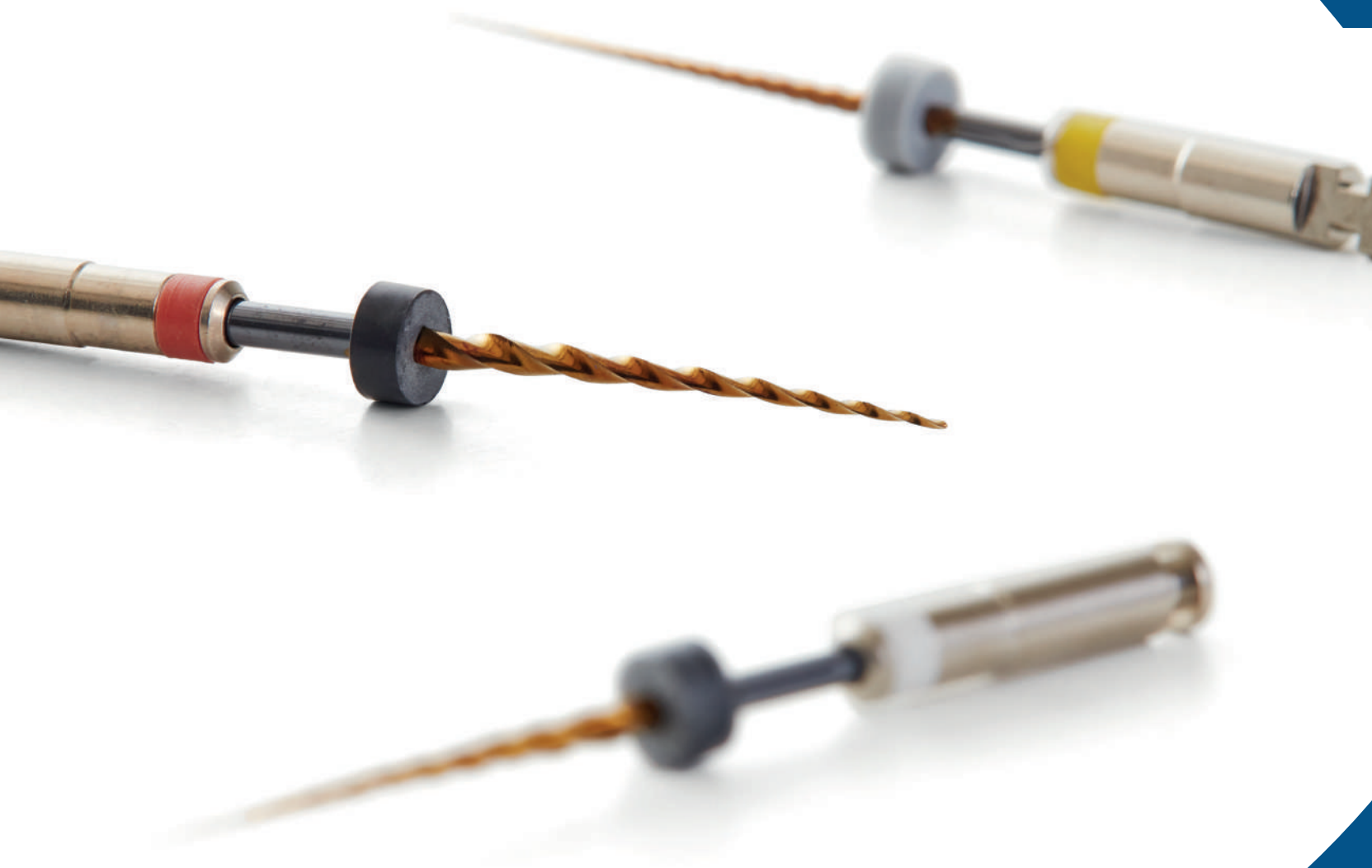

PRECISION

Absolute Shaper

Dall'esperienza di Dentalica in ambito endodontico nascono i nuovi strumenti Absolute Shaper, la sequenza in Nichel Titanio per trattamenti endodontici.

Gli strumenti Absolute Shaper combinano caratteristiche differenti per ottenere una linea completa ed efficiente che copre tutte le fasi della procedura endodontica.

La sistematica **Absolute Shaper** è semplice e veloce: solo 3 strumenti, sempre gli stessi per qualsiasi tipo di canale.



Trattamento termico C-Wire



Gli strumenti Absolute Shaper hanno il vantaggio di essere trattati con electropolishing e con il trattamento termico C-Wire.



Questa innovativa lavorazione della superficie, unita al design dello strumento, permette di ridurre le irregolarità della superficie ed aumentare la sua flessibilità e resistenza alla frattura, per terapie endodontiche sicure anche in caso di curvature severe.

Strumento con asse decentrato

La principale caratteristica di Absolute Shaper è la superficie ad asse decentrato che riduce lo stress a carico dello strumento, migliora la rimozione dei detriti prodotti durante la sagomatura.

I nostri Absolute Shaper, infatti, sono dotati di una sezione a tripla elica in cui i punti di taglio possiedono raggi differenti rispetto all'asse centrale e ruotano su circonferenze diverse tra loro. Questa anatomia dello strumento favorisce un funzionamento ciclico che permette un'ottima penetrazione nel canale ed impatto sulla superficie e allo stesso tempo un efficiente allontanamento dei detriti in direzione coronale. La sezione asimmetrica riduce la superficie di contatto delle lame con le pareti del canale per un minor impiego durante la fase di taglio e quindi minor stress e rischio di rottura dello strumento. Inoltre, il passo variabile delle spire riduce il rischio di avvitanimento dello strumento, garantendo sicurezza ed affidabilità nelle diverse fasi della procedura.

Asse decentrato

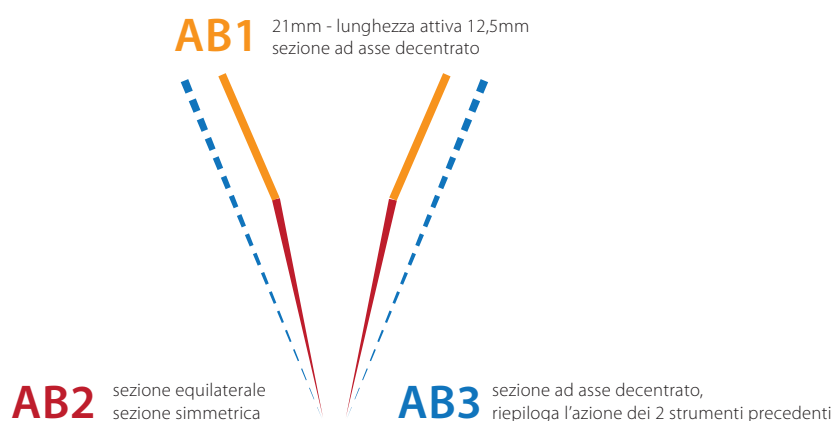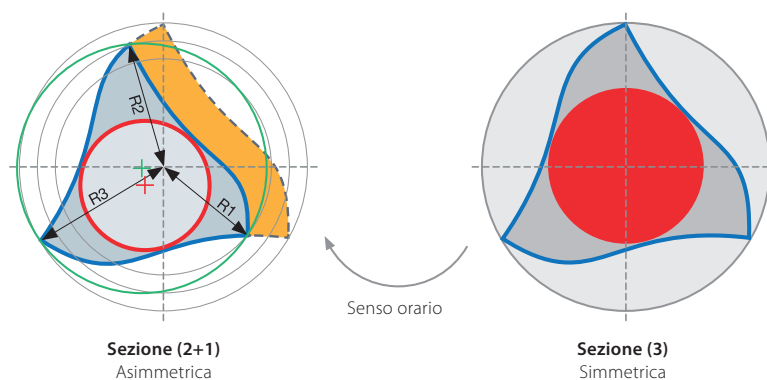

Sistematica completa, semplice ed efficace

La sistematica Absolute Shaper è composta solamente da 3 strumenti NiTi a rotazione continua, sempre gli stessi per qualsiasi tipo di canale. Il vantaggio si concretizza in un protocollo semplice ed efficace che può essere completato, se necessario, da strumenti accessori (Absolute Shaper Apical) che permettono l'ampliamento e la rifinitura apicale.

Absolute Shaper AB1

A sezione asimmetrica (2+1), consente la preparazione dei 2/3 coronali.



Absolute Shaper AB2

A sezione simmetrica (3), permette di avanzare in modo semplice e sicuro fino alla lunghezza di lavoro. È disponibile in 3 lunghezze, 21-25-31 mm.



Absolute Shaper AB3

A sezione asimmetrica (2+1), racchiude l'azione dei 2 strumenti precedenti e garantisce una preparazione apicale agevolando la detersione e le procedure di otturazione.



**AB1 - 2/3LL**

2/3 coronali
Sezione asimmetrica
Ø 25 mm – conicità 6%
Lunghezza 21 mm

**AB2 - LL**

Sezione simmetrica
Ø 25 mm – conicità 4%
Lunghezza 21-25-31 mm

**AB3 - LL**

Sezione asimmetrica
Ø 25 mm – conicità 6%
Lunghezza 21-25-31 mm

Vantaggi

- Protocollo semplice e veloce con soli 3 strumenti
- Ottimo drenaggio dei detriti
- Trattamento termico di superficie per una maggiore flessibilità
- Sequenza completa con strumenti per rifinitura apicale
- Sezione asimmetrica con minor stress a carico dello strumento
- Confezionamento in blister sterile

Absolute Shaper Apical

L'ampliamento apicale è assicurato, quando necessario, da strumenti accessori **Absolute Shaper Apical** che permettono di ampliare la preparazione apicale senza alcuna modifica alla preparazione coronale già realizzata con la sequenza base. Questo è possibile grazie ad un disegno speciale che presenta una conicità del 6% solo nella porzione apicale dello strumento.



Vantaggi

- Ampliamento e rifinitura apicale ottimali
- Conicità 6% solo nella porzione apicale consente di rispettare la preparazione coronale ottenuta con la sequenza base
- Sezione asimmetrica con minor stress a carico dello strumento
- Ottimo drenaggio dei detriti
- Trattamento termico di superficie per una migliore flessibilità
- Confezionamento in blister sterile

Absolute Access

Un passaggio fondamentale della preparazione canalare consiste nell'ampliamento dell'imbocco e nell'eliminazione delle interferenze coronali.

Questa prima fase del trattamento facilita l'accesso degli strumenti per sagomatura al terzo medio e al terzo apicale, limitandone lo stress iniziale e i rischi di rottura.

Absolute Access racchiude in un unico strumento la capacità di allargare l'imbocco e sagomare le pareti della camera pulpare. Con un solo passaggio, rende qualsiasi canale correttamente predisposto per il miglior risultato endodontico.



Vantaggi


- Strumento in NiTi con sezione asimmetrica
- Eccellente capacità di taglio
- Adatto a qualsiasi sistematica endodontica
- Confezionato in blister sterile per una maggiore sicurezza
- Trattato termicamente per una maggiore resistenza e flessibilità

Absolute Glide

In presenza di canali di difficile accesso (molto stretti, curvi e calcificati) gli strumenti meccanici per il cateterismo hanno il compito di facilitarne la preparazione, rispettando sempre l'anatomia del canale. Rimuovendo le interferenze e liberando il canale da una parte del suo contenuto, creano un "sentiero guida" per gli strumenti rotanti di sagomatura. Rispetto alle lime manuali in acciaio, permettono di realizzare questi passaggi in modo più sicuro, semplice ed efficace, limitando i rischi di errore come false strade o la deviazione della traiettoria canale iniziale.

Absolute Glide è lo strumento endodontico in NiTi a rotazione continua concepito per realizzare cateterismi in modo rapido e sicuro e creare il sentiero guida.

La sua sezione asimmetrica e i 3 angoli attivi di taglio permettono una migliore eliminazione dei detriti e gli conferiscono un'eccellente capacità di taglio. Inoltre, il passo variabile di tra ogni angolo di taglio limita il rischio di avvita-

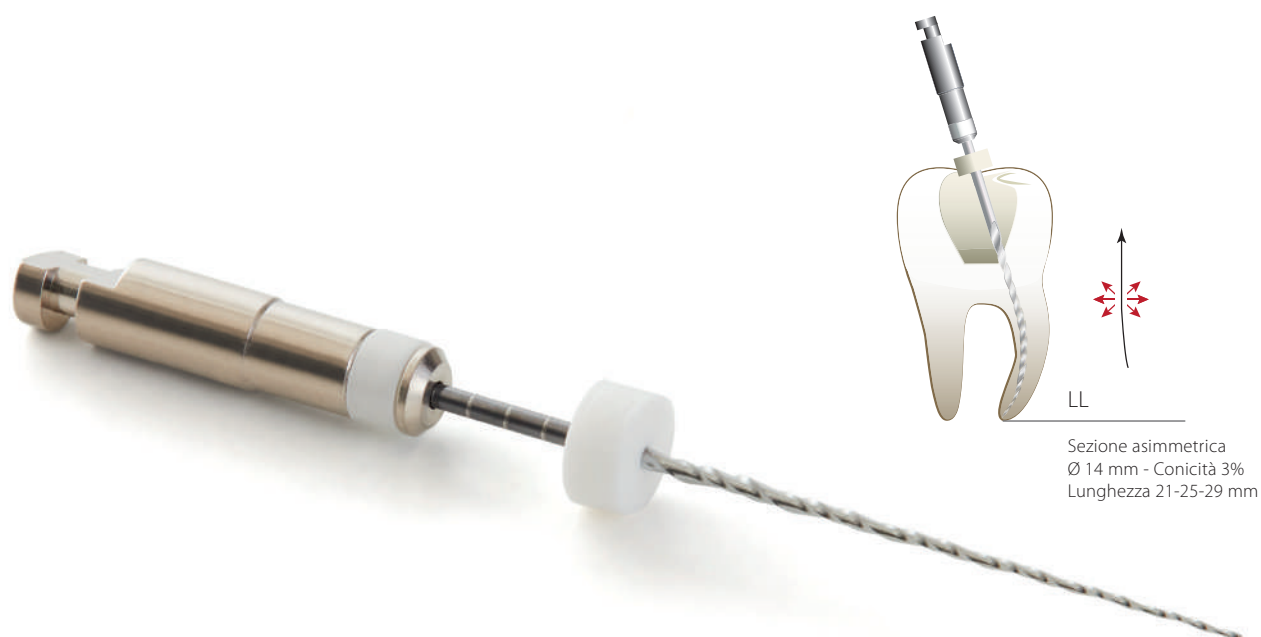



Vantaggi

- Strumento in NiTi con sezione asimmetrica
- Flessibilità ed elevata resistenza
- Disponibile in 3 lunghezze: 21mm, 25mm, 29mm
- Rispetta l'anatomia del canale radicolare
- Passo variabile tra ogni angolo di taglio per un minor rischio di avvita-
- 3 angoli di taglio attivi su 3 diversi raggi per un'ottima capacità di taglio ed eliminazione dei detriti
- Pronto all'uso, confezionato in blister sterile

ABSOLUTE

Sequenza operativa

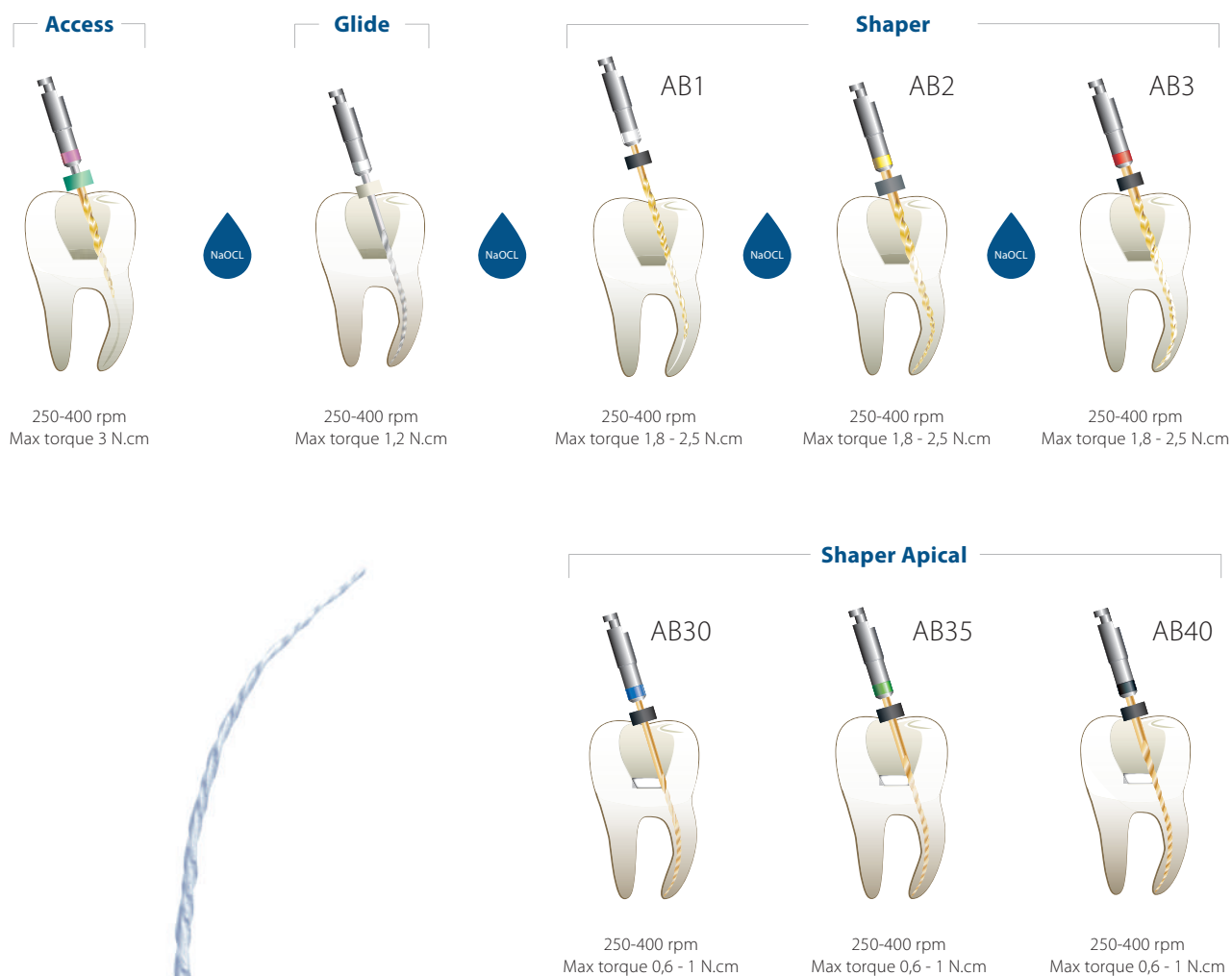

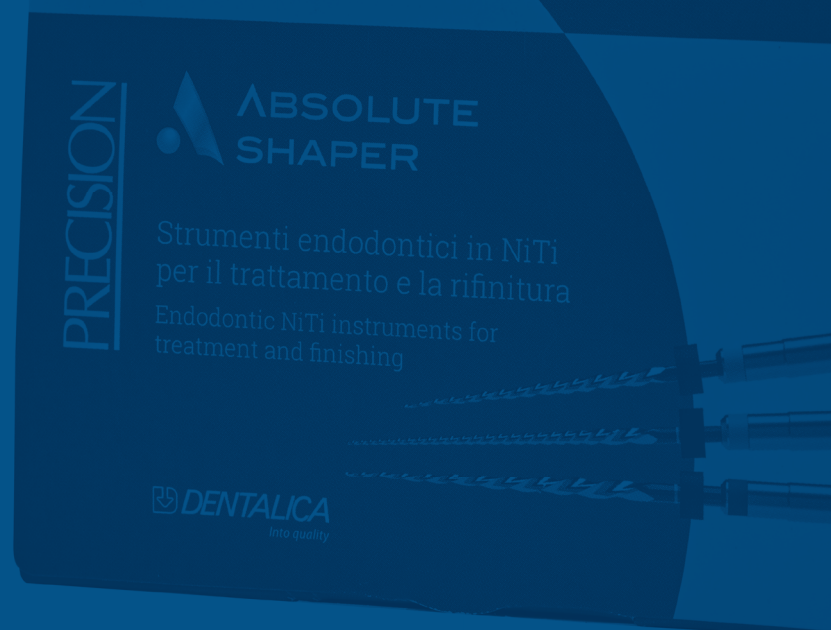


Caso clinico

Dr. Filippo Cardinali



Lastra pre-operatoria

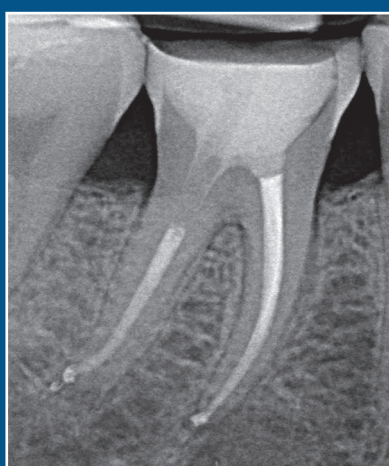

Lastra post-operatoria

Trattamento canalare ortograde dell'elemento 46: sagomatura con Absoulte shaper, detersione con Ipoclorito di Sodio e EDTA attivati con Ultrasuoni, otturazione con tecnica della compattazione verticale a caldo della guttaperca.



Absolute Access

Blister sterile da 5 strumenti
PR0120720AA



Absolute Glide

Blister sterile da 5 strumenti

L21	PR0120721AG
L25	PR0120725AG
L29	PR0120729AG



Absolute Shaper

Blister sterile da 5 strumenti

AB1 - 6% L21	PR012421AB1
AB2 - 4% L21	PR012421AB2
AB2 - 4% L25	PR012425AB2
AB2 - 4% L31	PR012431AB2
AB3 - 6% L21	PR012421AB3
AB3 - 6% L25	PR012425AB3
AB3 - 6% L31	PR012431AB3



Absolute Shaper Apical

Blister sterile da 5 strumenti

AB30 6% L21	PR012421AB30
AB30 6% L25	PR012425AB30
AB30 6% L31	PR012431AB30
AB35 6% L21	PR012421AB35
AB35 6% L25	PR012425AB35
AB35 6% L31	PR012431AB35
AB40 6% L21	PR012421AB40
AB40 6% L25	PR012425AB40
AB40 6% L31	PR012431AB40



Absolute Shaper - Procedure Pack

1 Absolute Access, 1 Absolute Glide, 1 Absolute Shaper AB1,
1 Absolute Shaper AB2, 1 Absolute Shaper AB3

L21	PR012421ASP
L25	PR012425ASP
L31	PR012431ASP

PRECISION

La gamma Precision è nata nel 1994.

È nata con lo spirito di dare certezza. La certezza di avere in mano solo soluzioni affidabili.

Ogni prodotto marchiato Precision è il risultato di una lunga ed attenta ricerca a livello internazionale, presso i migliori produttori. Noi non produciamo, bensì selezioniamo e questo ci permette di ottenere sempre il meglio, rivolgendoci solo ad aziende leader nella produzione di quello specifico materiale.

Per questo motivo i nostri prodotti rappresentano il meglio per l'arte odontoiatrica.

Dal 1994 non abbiamo smesso di offrire certezze ai nostri clienti.

Creato in esclusiva per



PRECISION è un marchio di:
DENTALICA S.p.A. – Via Rimini, 22 – 20142 Milano
info@dentalica.com – www.dentalica.com